



Vitalograph bpc0-6

Appareil de dépistage de la BPCO

Manuel d'utilisation

Mise en route de l'appareil

- 1 Allumer
- 2 Entrer l'âge du patient
Appuyer sur ou pour changer l'âge
Appuyer sur pour valider
- 3 Entrer la taille du patient
Appuyer sur ou pour changer la taille
Appuyer sur pour valider
- 4 Choisir le sexe du patient
Appuyer sur ou pour choisir le sexe
Appuyer sur pour valider

Réaliser un test

- 1 Insérer l'embout jetable muni d'une valve expiratoire
- 2 Montrer au patient comment souffler
 - ▼ Inspirer profondément, bloquer...
 - ▼ Prendre l'embout en bouche, le mordre légèrement pour éviter les fuites
 - ▼ Puis, souffler le plus fort et le plus vite possible pendant 6 secondes (jusqu'au bip)
- 3 Répéter 2 fois la manœuvre

 = mauvais test
- 4 Appuyer sur pour voir le meilleur résultat

Résultat du test

Normal

La flèche indique toujours le meilleur test...




Négatif:

- ▼ Pas de Spirométrie nécessaire
- ▼ Pas d'obstruction : vert

BPCO possible

La flèche indique toujours le meilleur test...

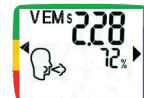


Positif:

- ▼ Spirométrie indispensable
- ▼ Classification de la BPCO de I à IV

Restriction possible

La flèche indique toujours le meilleur test...

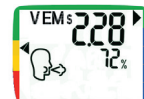

Faible probabilité d'obstruction:

- ▼ Spirométrie requise
- ▼ BPCO peu probable, restriction possible

Affichage des paramètres


- 1 Affichage du VEMS et du % de la valeur théorique
Affichage des valeurs de chaque manœuvre jusqu'à l'appui de ...
- 2 Appuyer sur pour voir le VEM6, le rapport VEMS/VEM6, le % de la valeur théorique et l'âge estimé des poumons
- 3 Appuyer sur pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil

Nettoyage & Désinfection

La coque de l'appareil doit être nettoyée chaque semaine, voir plus souvent si nécessaire. Il est recommandé d'utiliser des lingettes désinfectantes, avec une attention particulière sur la zone d'insertion de l'embout buccal.

www.vitalograph.com



Rapport VEMS/VEM6 et VEMS en % de la valeur théorique		Classification de la BPCO		Sévérité de l'obstruction		% du VEMS aux valeurs théoriques
						
		Normal		0	≥ 80 %	VEMS/VEM6 ≥ 0.7
		Stade I		1	< 80 %	VEMS/VEM6 < 0.70 & VEMS ≥ 80 % de la Valeur Théorique
		Stade II		2	< 50 %	VEMS/VEM6 < 0.70 & VEMS < 80 % de la Valeur Théorique
		Stade III		3	< 30 %	VEMS/VEM6 < 0.70 & VEMS < 50 % de la Valeur Théorique
		Stade IV				VEMS/VEM6 < 0.70 & VEMS < 30 % de la Valeur Théorique